

멈춘 심장을 뛰게 하는 자동심장충격기(AED)



자동심장충격기를 사용하면, 심폐소생 확률을 높일 수 있어요!

⊕ 자동심장충격기 사용방법 ⊕

1 전원 켜기

- 심폐소생술 도중 자동심장충격기*가 도착하면 지체 없이 전원 버튼 누르기


* 반응과 정상적인 호흡이 없는 심정지 환자에게만 사용



2 패드 부착

- 자동심장충격기 중 그림의 설명을 보고 정확한 위치*에 패드 부착

* 패드 1 : 오른쪽 쇄골 아래
패드 2 : 왼쪽 젖꼭지 아래 겨드랑이선

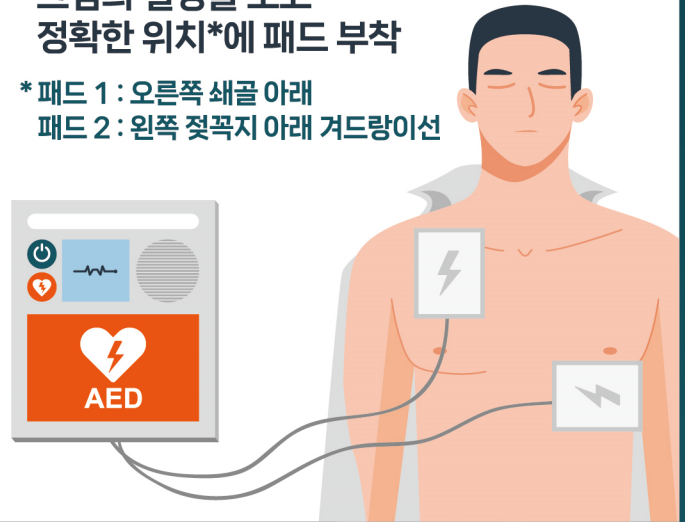

3 심장리듬 분석

- 심장충격기가 심장리듬을 분석하는 동안 환자에게 닿지 않게 떨어지기

심장충격이 필요한 경우

"심장충격이 필요합니다"라는 음성지시와 함께 자동으로 충전되고, 충전 중엔 가슴압박 실시

심장충격이 필요 없는 경우

심폐소생술 계속 실시



4 심장충격 실시

- 심장충격이 필요한 경우 깜빡이는 버튼을 눌러 심장충격 실시

※ 다른 사람이 환자에게서 떨어져 있는지 꼭 확인!

